

GammaLab V2.0

Pontificia Universidad Javeriana

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE



Autores:

Juan Felipe Romero Ortiz
Laura Juliana Garzón Arias
Xiomara Herrera Suárez
Sebastián Almanza Galvis

Fecha: 23/05/2026

Versión: v1.0

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Sección	Descripción	Responsable
v1.0	17/05/26 inicio del documento	Se inició la creación del SRS y se dividió el trabajo para cada persona	Juan Felipe Romero Ortiz, Laura Juliana Garzón Arias, Xiomara Herrera Suárez, Sebastián Almanza Galvis	

Tabla 1: Historial de cambios

CONTENIDO

Índice de tablas

Índice de figuras

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Propósito

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (SRS) de GammaLab 2.0. Con el propósito de brindar una orientación metodológica clara del inicio del ciclo de desarrollo. GammaLab v2.0 es una interfaz gráfica de escritorio de tipo standalone orientada al análisis, procesamiento y visualización de señales electroencefalográficas o EEG. Concebido como una alternativa de código abierto y enfocado en el uso local para el Laboratorio de Electrofisiología de la Universidad de Colombia, el sistema está desarrollado con el lenguaje Python, utilizando el framework PySide6 y librerías científicas como VTK. Siguiendo con la visión de GammaLab v1.0, su diseño arquitectónico evoluciona con el fin de resolver brechas en el paralelismo de cómputo y añadir nuevos métodos de acoplamiento cruzado de frecuencias (Phase-Amplitude-Coupling o PAC).

Este documento especifica de manera formal, atómica y verificable la totalidad de los requerimientos funcionales y no funcionales que rigen el desarrollo de GammaLab v2.0. El alcance de este abarca detalladamente los requerimientos de interfaz de usuario, gestión de memoria DataStore, el procesamiento asíncrono en segundo plano del Kernel y las especificaciones técnicas del nuevo módulo de análisis (PAC). Se excluye del alcance del SRS las rutas de mantenimiento técnico a largo plazo del software, así mismo el código heredado de GammaLab v1.0 que se conservará sin modificaciones funcionales.

La audiencia de este documento comprende cuatro grupos: el equipo de desarrollo, que lo utilizará como referencia técnica durante el diseño y la implementación; la directora del proyecto, en su rol de Product Owner, quien lo empleará para validar que el alcance acordado se mantenga a lo largo del desarrollo; el Laboratorio de Señales de la Universidad Nacional de Colombia, como cliente y usuario final del sistema; y los evaluadores académicos del proyecto de grado, ante quienes el documento evidencia el rigor metodológico del proceso de ingeniería seguido.

La importancia de este SRS radica en que este actúa como puente de información oficial entre las necesidades del laboratorio y la implementación técnica del software. Al definir los criterios de medición para cada funcionalidad y asociarlos a los requerimientos, el documento mitiga el riesgo de ambigüedad técnica. Por último, este texto sirve como un instrumento principal de trazabilidad y verificación que, a lo largo del ciclo de vida del proyecto, garantice que cada incremento dentro del software responda de forma adecuada a las necesidades previamente acordadas.

1.1.1. Contexto - GammaLab v1.0

GammaLab nació en 2025 como una alternativa de código abierto a las herramientas con licencia comercial y fragmentada en el mercado, enfocada específicamente en las necesidades del Laboratorio de Electrofisiología de la Universidad Nacional de Colombia. El sistema se estructuró bajo una arquitectura microkernel con un ecosistema de plugins usando Python,

permitiendo el análisis de señales EEG en los dominios de tiempo, frecuencia y tiempo-frecuencia mediante una interfaz gráfica unificada.

Aunque la primera iteración fue validada exitosamente con un 87.5% de coincidencia frente al sistema de referencia BOARD-FTD-PACC, las pruebas de aceptación con el usuario final identificaron brechas críticas para su correcta adopción. Entre estas limitaciones se destacan la ausencia de persistencia de sesiones y gestión de proyectos, la falta de rendimiento al no contar con mecanismos de concurrencia o paralelismo para la distribución de tareas pesadas.

Además, el equipo de investigación reportó la necesidad de contar con un control más preciso sobre la densidad de muestreo y la incorporación de métodos analíticos avanzados. Por otro lado, GammaLab v2.0 se concibe más allá de solo extender estas capacidades, sino para estabilizar la arquitectura mediante el procesamiento asíncrono en segundo plano, así garantizando la robustez técnica necesaria para los investigadores.

1.2. Alcance

El alcance de GammaLab v2.0 lo definen los límites funcionales, técnicos y operativos del sistema, asegurando la entrega de un software robusto y enfocado en el entorno de investigación.

GammaLab v2.0 se define como una aplicación de escritorio standalone, lo que significa que es local y funcional sin acceso a internet. Desarrollada en el lenguaje Python bajo el framework PySide6 y librerías de visualización científicas VTK. El sistema está diseñado específicamente para interactuar con archivos de señales electroencefalográficas (EEG) en formatos estándar como ABF, EDF, BDF y MAT. Su arquitectura está diseñada para investigadores y estudiantes del Laboratorio de Electrofisiología de la Universidad Nacional de Colombia, permitiéndoles ejecutar análisis avanzados sin requerir conocimientos en programación, ni fragmentando su flujo de trabajo en diferentes herramientas durante sus análisis. Con el fin de cerrar las brechas observadas de la primera iteración del software, la visión de esta segunda iteración se definirá por medio de las siguientes funciones:

Funcionalidades adicionales

- **Persistencia de sesión y gestión de proyectos:** Implementación del componente ProjectSession para permitir el guardado local, creando una extensión propia para GammaLab (.glab) y la restauración automática del entorno de trabajo.
- **Kernel de procesamiento asíncrono y paralelo:** Desacoplamiento de la interfaz de usuario mediante una arquitectura de multiprocesamiento para la ejecución paralela del análisis matemático pesado en segundo plano sin congelar la GUI.
- **Módulo de análisis PAC:** Incorporación de un plugin especializado para cuantificar el acoplamiento phase-amplitude coupling, permitiendo la selección cruzada de canales fuentes.
- **Optimización visual y gráfica vectorial:** Inclusión de técnicas de submuestreo de señal dinámica para navegación fluida (≥ 24 FPS) y soporte de exportación gráfica

en alta calidad mediante el formato EMF.

Funcionalidades excluidas (fuera de alcance)

- El sistema no implementará almacenamiento de datos en la nube, sincronización web o bases de datos compartidas. Todo análisis ejecutado en la aplicación se realizará de forma local en el disco duro del usuario.
- El sistema no incluye módulos para la adquisición de señales EEG en tiempo real mediante conexiones físicas a amplificadores o diademas de electrodos.
- Se excluye el soporte para el procesamiento de otro tipo de bioseñales; el soporte es exclusivo de señales electroencefalográficas.

El desarrollo de esta evolución funcional y arquitectónica aporta tres aspectos claves para el ecosistema del laboratorio:

- **Análisis avanzado:** Al generar un entorno puramente visual para métricas complejas de acoplamiento cruzado de secuencias, se elimina la fricción técnica de programar algoritmos desde cero.
- **Soberanía tecnológica y sostenibilidad financiera:** Al ser una alternativa sólida de código abierto bajo la licencia MIT, el laboratorio elimina dependencias de licencias costosas o plataformas comerciales cerradas.
- **Eficiencia computacional:** La paralelización del kernel reduce drásticamente los tiempos de procesamiento de grandes volúmenes de datos, optimizando los tiempos de respuesta del programa.

El laboratorio suele tener nulo mantenimiento técnico especializado para software. Por lo tanto, el diseño de GammaLab v2.0 se alinea con la meta de entregar una herramienta autónoma, autogestionable y autoexplicativa. EL despliegue mediante un instalador ejecutable de un solo clic y la incorporación de ayudas contextuales (tooltips) robustas garantizan que el laboratorio pueda usar la herramienta de manera independiente, apoyando en sus proyectos de investigación.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones

Acrónimo / Abreviación	Definición
EEG	Electroencefalografía (<i>Electroencephalography</i>).
GUI	Interfaz gráfica de usuario (<i>Graphical User Interface</i>).
ERP	Potencial relacionado a eventos (<i>Event Related Potential</i>).
FFT	Transformada Rápida de Fourier (<i>Fast Fourier Transform</i>).
PSD	Densidad Espectral de Potencia (<i>Power Spectral Density</i>).
PAC	Acoplamiento fase-amplitud (<i>Phase-Amplitude Coupling</i>).
VTK	Visualization Toolkit. Librería de visualización científica 2D y 3D.
CSV	Valores separados por comas (<i>Comma-Separated Values</i>).
XLSX	Formato de hoja de cálculo basado en Office Open XML utilizado por Microsoft Excel.
PNG	Portable Network Graphics.
JPG	Joint Photographic Experts Group.
EMF	Enhanced Metafile Format.
ABF	Axon Binary File.
EDF	European Data Format.
BDF	BioSemi Data Format.
MAT	Formato de archivo de MATLAB.
RAM	Random Access Memory.
VRAM	Video Random Access Memory.
CPU	Central Processing Unit.
I/O	Input/Output.
UX	User Experience.
SRS	Software Requirements Specification.
PMP	Project Management Plan.

Tabla 2: Acrónimos y abreviaciones en el SRS

1.4. Referencias

- [1] Microsoft Corporation, “Windows – product family overview,” Available: <https://www.microsoft.com/windows>. Accessed: 2025.
- [2] Python Software Foundation, “The Python tutorial — Python 3.11 documentation,” 2023. Available: <https://docs.python.org/3/tutorial/index.html>. Accessed: 2025.
- [3] Riverbank Computing, “PyQt — Python bindings for Qt,” 2025. Available: <https://www.riverbankcomputing.com/software/pyqt/>. Accessed: 2025.
- [4] Kitware, “The Visualization Toolkit (VTK),” 2025. Available: <https://vtk.org/>. Accessed: 2025.

- [5] NumPy Developers, “NumPy documentation,” 2025. Available: <https://numpy.org/doc/stable/>. Accessed: 2025.
- [6] SciPy Community, “SciPy — fundamental algorithms for scientific computing in Python,” 2025. Available: <https://scipy.org/>. Accessed: 2025.
- [7] The pandas Development Team, “pandas — Python data analysis library,” 2025. Available: <https://pandas.pydata.org/>. Accessed: 2025.
- [8] G. R. Lee, R. Gommers, F. Wasilewski, K. Wohlfahrt, and A. O’Leary, “PyWavelets: A Python package for wavelet analysis,” *Journal of Open Source Software*, vol. 4, no. 36, p. 1237, 2019. Available: <https://doi.org/10.21105/joss.01237>.
- [9] S. W. Harden, “pyabf 2.3.5,” 2022. Available: <https://pypi.org/project/pyabf/>.
- [10] Teunis van Beelen, “pyEDFlib,” 2025. Available: <https://pypi.org/project/pyEDFlib/>. Accessed: 2025.
- [11] Python Software Foundation, “concurrent.futures — launching parallel tasks,” 2025. Available: <https://docs.python.org/3/library/concurrent.futures.html>. Accessed: 2025.
- [12] pytest Development Team, “pytest documentation,” 2025. Available: <https://docs.pytest.org/en/stable/>. Accessed: 2025.

1.5. Apreciación Global

Este documento especifica los requerimientos de software de GammaLab 2.0, abarcando desde la descripción general del sistema hasta la definición detallada de sus requerimientos funcionales y no funcionales. Se organiza en tres bloques principales: una descripción general que contextualiza el producto, sus usuarios y las condiciones bajo las cuales opera; la especificación de requerimientos funcionales, organizada por módulo; y los requerimientos no funcionales junto con los procesos de ingeniería y verificación aplicados. Cada sección cumple un rol específico: los requerimientos funcionales y no funcionales orientan las decisiones de diseño e implementación, mientras que el modelo del dominio y la distribución de requerimientos permiten mantener una comprensión uniforme del sistema entre todos los involucrados.

2. DESCRIPCIÓN GLOBAL

2.1. Perspectiva del Producto

GammaLab 2.0 es una aplicación de escritorio standalone para análisis y visualización de señales neurofisiológicas (EEG), ejecutada localmente en estaciones de trabajo con Windows 10 o superior. El sistema mantiene una arquitectura modular orientada a plugins, donde un Kernel interno (IoC) orquesta servicios comunes como el almacenamiento de procesamientos, la gestión de eventos y la ejecución de tareas.

La aplicación no introduce dependencias de red ni bases de datos externas. GammaLab 2.0 pertenece a una familia de productos: es la segunda versión de GammaLab 1.0, desarrollada en la Pontificia Universidad Javeriana bajo la dirección de la misma directora y orientada al mismo cliente, el Laboratorio de Señales de la Universidad Nacional de Colombia.

Sobre la versión anterior, esta versión incorpora mejoras en la experiencia de usuario, persistencia y restauración de proyectos, una estrategia de paralelización del procesamiento implementada en el Kernel y un nuevo módulo de análisis basado en acoplamiento cruzado de frecuencias (*Cross-Frequency Coupling*).

El nuevo módulo incluye el análisis de acoplamiento fase-amplitud (*Phase-Amplitude Coupling*, PAC) sobre un canal, PAC entre dos canales y coherencia de fase (PPC). GammaLab 2.0 es compatible con los archivos y flujos de trabajo de su versión original.

2.1.1. Interfaces con el Sistema

GammaLab 2.0 no se integra con sistemas externos ni servicios en la nube. Su operación es completamente local y su contexto es el procesamiento de archivos de señales EEG adquiridos previamente con herramientas externas.

Las interfaces con el entorno son de dos tipos: interfaces de archivo para la entrada y salida de señales, e interfaces de usuario a través de la GUI, sin intercambio de mensajes con servicios remotos.

La comunicación entre los plugins y el Kernel del sistema se realiza a través del contrato de integración definido en la arquitectura interna. La paralelización opera dentro del Kernel, que puede ejecutar tareas mediante hilos para operaciones de entrada y salida o mediante procesos independientes para cálculos intensivos.

2.1.2. Interfaces con el Usuario

Se describen los medios de interacción previstos y sus características técnicas:

- **Teclado.** Entrada de datos en formularios para la definición de parámetros como frecuencia de muestreo, rangos de frecuencias, selección de canales, selección de trials y

demás parámetros requeridos por los módulos de análisis.

- **Ratón/Trackpad.** Navegación y control de la GUI: selección de botones, menús, pestañas, canales, trials e interacción con gráficas.
- **Pantalla.** Visualización de la interfaz, pestañas y gráficos generados por cada módulo. Especificaciones: resolución mínima 1920 x 1080 px; tamaño recomendado mayor o igual a 14 pulgadas.
- **Interfaz gráfica (GUI).** Desarrollada en Python con PySide6 y los componentes Qt. Está organizada en módulos navegables con barras laterales para la selección de la señal activa, la configuración de parámetros por plugin, la ejecución de análisis y la visualización de resultados. GammaLab 2.0 incorpora las vistas de PAC de un canal, PAC inter-canal y coherencia de fase.
- **Interfaz de entrada de archivos EEG.** Permite al usuario seleccionar y cargar archivos de señales adquiridos externamente en los formatos `.abf`, `.edf`, `.bdf` y `.mat`, mediante el selector de archivos nativo de Windows.

2.1.3. Interfaces con el Hardware

GammaLab 2.0 no establece comunicación directa con equipos de adquisición de señales ni utiliza protocolos de red o puertos de comunicación, dado que opera exclusivamente de manera local sobre archivos previamente adquiridos.

La interacción con hardware se limita a dispositivos estándar de entrada, como teclado, ratón y trackpad, y de salida, como la pantalla. Durante la ejecución, los datos del sistema se almacenan temporalmente en memoria RAM y las tareas de procesamiento pueden distribuirse entre varios núcleos.

2.1.4. Interfaces con el Software

- **Windows.** Es el sistema operativo base sobre el que se ejecuta GammaLab 2.0. Se requiere Windows 10 de 64 bits o superior [?].
- **Python.** Es el lenguaje de programación base del sistema. Se utiliza la versión 3.11–3.12 [?].
- **PySide6.** Es el framework sobre el que se construye la interfaz gráfica del sistema, manejando widgets, layouts, navegación y eventos mediante los componentes Qt [?].
- **VTK.** Es la librería utilizada para el renderizado embebido de señales EEG y la visualización científica 2D y 3D dentro de la aplicación[?].
- **NumPy.** Provee las estructuras de arreglos multidimensionales y las operaciones matemáticas base del sistema, incluyendo las operaciones requeridas por los análisis espectrales y el análisis de acoplamiento cruzado de frecuencias.

- **SciPy.** Complementa a NumPy con módulos especializados para procesamiento de señales, incluyendo el cálculo de densidad espectral de potencia, interpolaciones y filtros como Butterworth [?].
- **MNE.** Proporciona herramientas especializadas para el procesamiento y análisis de señales neurofisiológicas.
- **TensorPAC.** Proporciona algoritmos para el cálculo del acoplamiento fase-amplitud, la generación de comodulogramas, histogramas de fase y vectores de acoplamiento medio.
- **Pandas.** Gestiona la organización y exportación de resultados en formatos tabulares como `.csv`, `.xlsx` y `.json` [?].
- **PyWavelets.** Provee los algoritmos para el cálculo de la transformada wavelet y su promedio en el dominio tiempo-frecuencia.
- **pyABF.** Permite la lectura de archivos de electrofisiología en formato `.abf` [?].
- **pyEDFlib.** Permite la lectura de archivos de electrofisiología en formato `.edf` [?].
- **concurrent.futures y multiprocessing.** Son módulos de la biblioteca estándar de Python utilizados para implementar la paralelización en el Kernel. Permiten distribuir las tareas entre hilos para operaciones de entrada y salida y entre procesos independientes para cálculos intensivos [?].
- **pytest.** Es el framework utilizado para la validación interna del sistema mediante pruebas unitarias, cubriendo módulos de carga de señales, filtrado, generación de trials, análisis PAC, análisis inter-canal, exportación y ejecución paralela de tareas [?].

2.1.5. Interfaces de Comunicación

GammaLab 2.0 no utiliza interfaces de comunicación de red. El sistema no implementa protocolos como TCP/IP, HTTP, sockets ni buses de mensajería, y no requiere conexión a redes locales o remotas para su operación.

Todo el procesamiento ocurre localmente en el equipo del usuario, sin intercambio de datos con sistemas externos.

2.1.6. Restricciones de Memoria

- **Entorno Python.** GammaLab 2.0 se desarrolla en Python 3.11+, requiriendo espacio en disco para el entorno base y sus dependencias.
- **Librerías Científicas.** El uso de NumPy, SciPy, MNE, Pandas, TensorPAC y PyWavelets genera un consumo adicional de memoria durante el procesamiento de señales EEG, dependiendo del tamaño de los arreglos manipulados y del número de trials seleccionados.

- **Interfaz Gráfica.** La GUI construida con PySide6 demanda memoria adicional durante la ejecución, especialmente cuando se visualizan simultáneamente varias gráficas y resultados.
- **Visualización Científica.** Las operaciones de renderizado mediante VTK pueden incrementar el consumo de RAM y VRAM dependiendo de la cantidad de señales y resultados visualizados.
- **Lectura de Archivos EEG.** Las librerías pyEDFlib y pyABF presentan un consumo variable según la cantidad de canales y puntos de cada señal.
- **Paralelización del Kernel.** La ejecución simultánea de tareas mediante *multiprocessing* implica la creación de procesos independientes, cada uno con su propio espacio de memoria. En escenarios de carga alta, esto puede incrementar el consumo total de RAM de acuerdo con el número de procesos activos.

Con base en lo anterior, se definen los siguientes requerimientos de hardware:

Requerimientos mínimos

- **Procesador:** CPU de 4 núcleos a 2.0 GHz o superior (AMD Ryzen 3 / Intel i3).
- **RAM:** 8 GB.
- **VRAM:** 1 GB (GPU integrada).
- **Almacenamiento:** 3 GB libres.

Requerimientos recomendados

- **Procesador:** CPU de 4–8 núcleos a 3.0 GHz o superior (AMD Ryzen 5 / Intel i5 o superior).
- **RAM:** 16 GB.
- **VRAM:** 2 GB.
- **Almacenamiento:** 20 GB libres en SSD.

2.1.7. Operaciones

Durante su uso, GammaLab 2.0 permite al usuario realizar las siguientes operaciones principales:

- **Cargar señal.** Seleccionar y cargar archivos de señal en formatos `.abf`, `.edf`, `.bdf` y `.mat`.
- **Preprocesamiento.** Dividir la señal en trials, eliminar artefactos de estimulación y aplicar filtros como Butterworth.

- **Análisis.** Procesar la señal en los dominios de tiempo, frecuencia y tiempo-frecuencia, incluyendo FFT, PSD, Wavelet, ERP, análisis PAC de un canal, PAC inter-canal y coherencia de fase PPC.
- **Análisis PAC.** Seleccionar bandas de fase y amplitud, seleccionar un trial o un promedio de trials, calcular el acoplamiento fase-amplitud y visualizar sus resultados.
- **Análisis inter-canal.** Seleccionar un canal como fuente de fase y otro como fuente de amplitud para calcular PAC inter-canal o coherencia de fase PPC.
- **Visualización y exportación.** Visualizar los resultados del procesamiento y exportarlos en formatos numéricos y gráficos como `.csv`, `.xlsx`, `.json`, `.jpeg`, `.jpg`, `.png` y `.tiff`.
- **Cálculo de medidas.** Calcular pendiente o amplitud sobre procesamientos realizados.
- **Ayuda.** Acceder al manual de usuario, documentación, tutoriales y última versión estable.

En GammaLab 2.0 se incorpora adicionalmente un instalador ejecutable, de modo que el usuario puede iniciar la aplicación directamente desde un ícono de escritorio sin requerir configuración manual del entorno Python.

2.1.8. Periodos de Actividad e Inactividad

GammaLab 2.0 ejecuta sus funciones mientras la aplicación está abierta. No mantiene procesos en segundo plano ni mecanismos de sincronización con servicios externos.

El sistema se considera activo cuando la aplicación está abierta y ejecuta operaciones de carga, análisis, renderizado, exportación o cálculo. Durante este periodo consume CPU, RAM y GPU según el volumen de las señales procesadas.

El sistema se considera inactivo cuando la aplicación ha sido cerrada manualmente o el sistema operativo ha detenido su ejecución. En este estado no consume CPU ni memoria y los proyectos permanecen almacenados en disco.

2.1.9. Tratamiento de Sesiones y Persistencia

GammaLab 2.0 permite guardar y restaurar proyectos de trabajo. Una sesión puede incluir archivos cargados, datasets activos, trials generados, parámetros configurados, análisis ejecutados, resultados almacenados y ventanas activas.

El usuario puede guardar manualmente el proyecto mediante las opciones *Save* y *Save As*, y abrirlo posteriormente mediante la opción *Open Project*.

Los parámetros utilizados en cada ejecución del análisis PAC se almacenan junto con sus resultados. La persistencia del proyecto es independiente de la exportación de resultados,

por lo que los datos numéricos y las representaciones gráficas también pueden exportarse manualmente.

2.1.10. Funciones de Soporte al Procesamiento

GammaLab 2.0 utiliza las siguientes librerías para el procesamiento y visualización de señales:

- **NumPy y SciPy:** operaciones matemáticas, filtrado y transformadas.
- **MNE y TensorPAC:** procesamiento de señales neurofisiológicas y cálculo de acoplamiento fase-amplitud.
- **Pandas:** manipulación estructurada y exportación de datos.
- **PyWavelets:** análisis tiempo-frecuencia mediante transformadas wavelet.
- **Matplotlib y VTK:** renderizado y visualización 2D y 3D.
- **pyEDFlib y pyABF:** lectura de formatos estándar de adquisición neurofisiológica.

2.1.11. Requerimientos de Adaptación del Sitio

GammaLab 2.0 está diseñado para ejecutarse localmente en equipos con Windows 10 o superior. Para su correcta instalación y operación, el equipo debe cumplir las siguientes condiciones:

- Permisos de lectura y escritura en la carpeta de instalación de la aplicación.
- Permisos para ejecutar scripts por consola en Windows.
- Python 3.11–3.13 instalado a nivel local, con disponibilidad para instalar las dependencias requeridas.
- Políticas de TI que permitan la ejecución de aplicaciones locales sin necesidad de acceso a red.
- Disponibilidad de espacio en disco y memoria RAM según los requerimientos definidos en la sección correspondiente.

2.2. Funciones del Producto

GammaLab 2.0 mantiene la totalidad de las funcionalidades de GammaLab 1.0, organizadas por ventanas según la arquitectura modular del sistema. Sobre esta base, la segunda versión introduce correcciones a los flujos de navegación existentes, mejoras en la experiencia de usuario, persistencia y restauración de proyectos, y un nuevo módulo de análisis basado en acoplamiento cruzado de frecuencias.

El nuevo módulo incluye PAC de un canal, PAC inter-canal y coherencia de fase PPC. Adicionalmente, la ejecución de los plugins puede realizarse en paralelo desde el Kernel,

reduciendo los tiempos de respuesta sin modificar el comportamiento visible de cada módulo para el usuario.

2.2.1. Pantalla general

La pantalla general de la aplicación está compuesta por una barra principal de funciones, la cual contiene las opciones *File*, *Home*, *Preprocessing* y *Analysis*.

En la barra lateral izquierda se encuentran tres iconos con las siguientes funciones:

- El primero permite visualizar la carpeta en la que se encuentra almacenado el proyecto.
- El segundo despliega una ventana inferior en la que se presentan los resultados de *slope* y *amplitude*.
- El tercero permite consultar el manual de usuario.

En la pestaña *File* se encuentran las siguientes opciones:

- *Open Signal*: permite cargar una señal individual dentro de la aplicación.
- *Open Project*: permite abrir un proyecto previamente guardado.
- *Save*: guarda los cambios realizados sobre el proyecto actual.
- *Save As*: permite guardar el proyecto actual bajo un nuevo nombre o ubicación.
- *Close Project*: cierra el proyecto que se encuentra abierto.
- *Exit*: cierra la aplicación.

2.2.2. Home

En la pestaña *Home* se encuentran tres categorías principales dentro de la barra de funcionalidades:

- **Measurements**: contiene las siguientes opciones:
 - *Slope*, con las subopciones *Slope 2 Trials* y *Slope All Trials*.
 - *Amplitude*.
 - Eliminar la última medición o la totalidad de las mediciones.
 - Mostrar u ocultar las mediciones en pantalla.
- **Zoom**: permite activar o desactivar la función de acercamiento sobre la señal.

2.2.3. Preprocessing

Agrupar los módulos de preparación de la señal para su análisis posterior.

- **Trials.** Divide la señal en ensayos, permitiendo seleccionar el canal a dividir, el canal de estímulos, el umbral (*threshold*), el número de estímulos y el tamaño de ventana. El usuario puede navegar entre los trials generados e incluirlos o descartarlos.
- **Remove Artifact.** Elimina artefactos presentes en los trials, permitiendo seleccionar el rango de tiempo a eliminar y escoger entre dos modos de corrección: interpolación del segmento o eliminación desde el inicio hasta el punto seleccionado.
- **Filter.** Aplica filtros a la señal, con selección del tipo de filtro (Butterworth), el rango de frecuencias, el orden y visualización del resultado sobre la señal completa y el primer trial.

2.2.4. Analysis

Agrupar los módulos de análisis en los dominios de tiempo, frecuencia y tiempo-frecuencia.

- **Average.** Calcula el promedio temporal de los trials generados y lo visualiza.
- **Event Related Potential (ERP).** Calcula el potencial relacionado a eventos, generando un *Butterfly Plot* con todos los trials alineados y un espectrograma de dinámica tiempo-frecuencia.
- **FFT.** Realiza la Transformada de Fourier, con definición de frecuencia de muestreo, rango de frecuencias y visualización del espectro de potencia.
- **FFT Average.** Calcula el promedio del FFT sobre los trials, con selección de frecuencia de muestreo y rango de frecuencias de interés.
- **PSD.** Calcula la Densidad Espectral de Potencia mediante el método de Welch, con selección de modo de cálculo, tipo de ventana, rango de frecuencias y modo de *detrend*.
- **PSD Average.** Promedia múltiples PSD de forma agregada, con configuración de frecuencia de muestreo, ventana y rango de frecuencias.
- **PSD Relative.** Calcula la PSD relativa, entregando potencia absoluta y relativa por banda, con selección de ventana, *detrend* y modo de cálculo.
- **Wavelet.** Calcula la Transformada Wavelet con configuración de frecuencia de muestreo, rango de frecuencias, número de ciclos, normalización y escala de visualización.
- **Wavelet Average.** Calcula el promedio de la Transformada Wavelet sobre múltiples trials, generando un mapa tiempo-frecuencia agrupado.
- **Phase-Amplitude Coupling (PAC) de un canal.** Calcula la relación entre la fase de una banda de baja frecuencia y la amplitud de un rango de frecuencias de una señal EEG mediante transformada wavelet. El usuario puede seleccionar la banda de fase, el rango de frecuencias de amplitud y el modo de trial, que puede corresponder a un trial individual o al promedio de varios trials.

El resultado incluye un mapa de acoplamiento fase-frecuencia, un histograma de distribución de amplitud en función de la fase y un vector de acoplamiento medio con su magnitud y ángulo.

- **PAC inter-canal.** Permite seleccionar un canal como fuente de fase y otro como fuente de amplitud para calcular el acoplamiento fase-amplitud entre ambos canales. El resultado incluye el mapa de acoplamiento fase-frecuencia, el histograma de fase y el vector de acoplamiento medio.
- **Coherencia de fase (PPC).** Permite seleccionar dos canales y calcular la coherencia de fase entre ellos. El resultado puede visualizarse y exportarse junto con sus datos numéricos.

Para ejecutar el análisis PAC debe existir una señal cargada con al menos un trial válido. Para ejecutar PAC inter-canal o PPC deben existir al menos dos canales con trials generados.

Las bandas de frecuencia seleccionadas deben encontrarse por debajo de la frecuencia de Nyquist. Además, el límite inferior de cada rango debe ser menor que el límite superior. Si los valores no cumplen estas condiciones, el sistema muestra un mensaje de error y solicita nuevos valores.

2.3. Características del Usuario

La herramienta está dirigida a usuarios interesados en el análisis y procesamiento de señales EEG, como estudiantes, investigadores y personal técnico. En el contexto de este proyecto, el cliente objetivo corresponde al Laboratorio de Electrofisiología de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

Características del usuario	Descripción
Nivel de Seguridad o de Privilegios	GammaLab 2.0 no define niveles de seguridad diferenciados, por lo que el usuario tiene acceso a todas las funcionalidades disponibles, incluyendo carga de señales, preprocesamiento, ejecución de análisis, visualización, persistencia y exportación de resultados.
Roles	El usuario es responsable de realizar tareas relacionadas con el procesamiento y análisis de señales EEG, incluyendo la preparación de señales, configuración de parámetros, ejecución de algoritmos y análisis de resultados obtenidos.
Nivel de Estudios o Experiencia Técnica	Se espera que el usuario posea conocimientos básicos o intermedios en adquisición y análisis de señales EEG, incluyendo conceptos como frecuencia de muestreo, segmentación en trials, filtrado, eliminación de artefactos y análisis en dominios de tiempo, frecuencia y tiempo-frecuencia. También se requiere familiaridad con comodulogramas, histogramas de fase y resultados de acoplamiento entre frecuencias.
Frecuencia de Uso	El sistema está orientado a usuarios que realizan actividades recurrentes de análisis y procesamiento de señales neurofisiológicas en entornos académicos, investigativos o de laboratorio.

Tabla 3: Características generales de los usuarios de GammaLab 2.0

2.4. Restricciones

Esta sección define los límites técnicos, normativos y operativos que condicionan el diseño, implementación y despliegue de GammaLab 2.0.

2.4.1. Restricciones Generales

El sistema opera íntegramente en inglés, tanto en la interfaz como en mensajes de error y alertas. Ante fallos internos o errores del usuario, el sistema debe mostrar mensajes claros sin interrumpir el flujo de ejecución.

El sistema debe soportar la carga de archivos con múltiples canales y permitir realizar análisis sobre al menos uno de ellos. Para los análisis inter-canal debe permitir seleccionar dos

canales. Las gráficas, tablas y resultados numéricos generados deben poder exportarse desde la interfaz.

2.4.2. Restricciones de Software

El sistema mantiene una arquitectura modular orientada a plugins, donde el Kernel orquesta la ejecución y permite incorporar nuevas capacidades sin modificar los plugins existentes.

El sistema se desarrolla en Python 3.11–3.12 y se distribuye como aplicación ejecutable localmente en Windows; alternativamente puede ejecutarse directamente desde el código fuente del repositorio oficial.

El procesamiento de señales utiliza NumPy, SciPy, MNE, TensorPAC y PyWavelets. La interfaz gráfica se construye con PySide6 y los componentes Qt. Los formatos de entrada soportados son `.abf`, `.edf`, `.bdf` y `.mat`.

La paralelización del Kernel se implementa mediante mecanismos de hilos y multiprocessing incluidos en la biblioteca estándar de Python.

2.4.3. Restricciones de Hardware

El sistema debe ejecutarse en Windows 10 de 64 bits o superior. Los requerimientos mínimos de hardware son:

- CPU de 4 núcleos a 2.0 GHz.
- 8 GB de RAM.
- 1 GB de VRAM.
- 3 GB de almacenamiento libre.

2.5. Modelo del dominio

El modelo del dominio describe las entidades conceptuales fundamentales involucradas en el funcionamiento de Gamma Lab 2.0 y las relaciones existentes entre ellas.

Estas entidades representan la estructura lógica utilizada por el sistema para gestionar señales EEG, ensayos experimentales, resultados derivados de análisis neurofisiológicos y sesiones persistentes de trabajo.

Gamma Lab 2.0 extiende la arquitectura desarrollada en Gamma Lab 1.0 mediante la incorporación de capacidades avanzadas relacionadas con:

- Persistencia y restauración automática de proyectos.
- Procesamiento paralelo de señales EEG.

- Gestión centralizada de datasets experimentales.
- Exportación y almacenamiento de resultados analíticos.
- Análisis de acoplamiento cruzado de frecuencias (*Cross-Frequency Coupling*).

El modelo propuesto permite desacoplar la lógica de procesamiento, persistencia y visualización, facilitando la extensibilidad, mantenibilidad y escalabilidad de la plataforma.

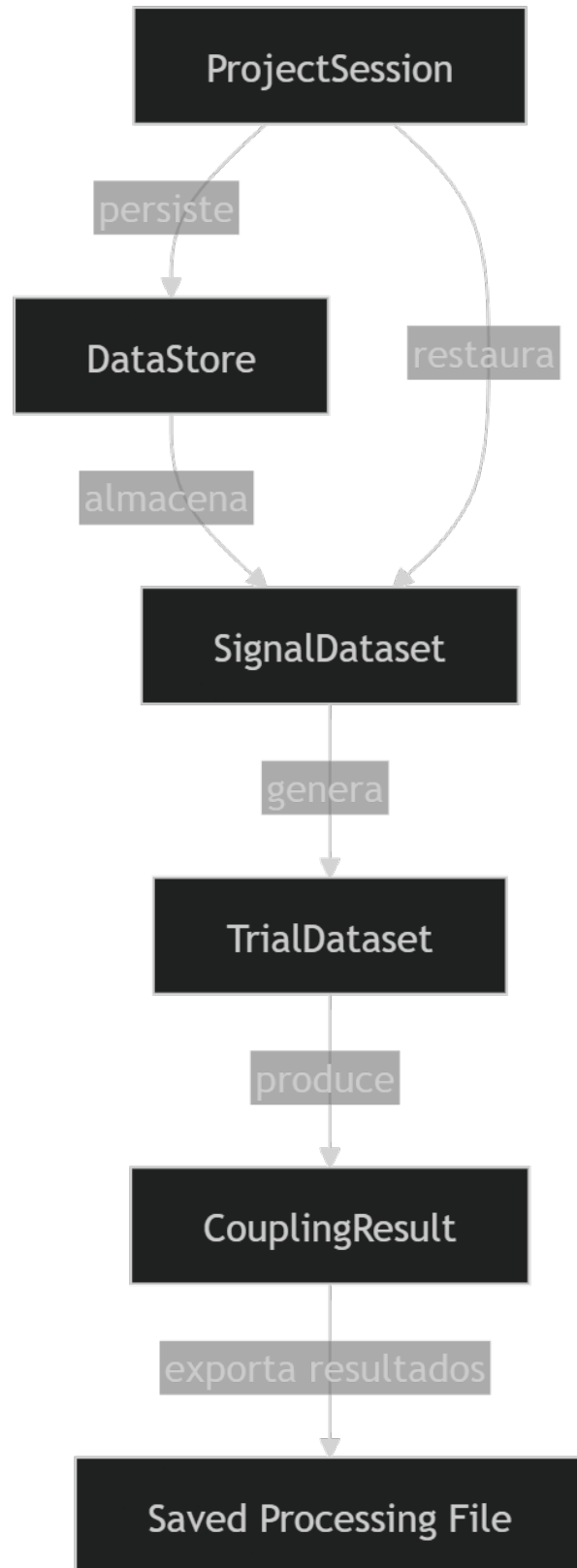


Figura 1: Modelo conceptual del dominio de Gamma Lab 2.0. Las entidades representan los componentes centrales de almacenamiento, procesamiento y persistencia de datos neurofisiológicos.

2.5.1. DataStore

ID	1
Elemento	DataStore
Descripción	Entidad responsable de gestionar el almacenamiento interno de señales, datasets experimentales, resultados analíticos y estructuras de sesión generadas durante la ejecución del sistema. Centraliza la persistencia temporal y permanente de la información utilizada por los diferentes módulos de Gamma Lab 2.0.
Responsabilidades	Administrar el acceso a datos, mantener referencias a datasets activos, coordinar operaciones de lectura y escritura y facilitar la persistencia de resultados de análisis neurofisiológicos.
Objetivo	Proporcionar una capa centralizada de administración de datos que reduzca el acoplamiento entre módulos y facilite la reutilización, persistencia y recuperación de información experimental.

Tabla 4: Entidad de dominio – DataStore

2.5.2. SignalDataset

ID	2
Elemento	SignalDataset
Descripción	Representa una señal EEG cargada dentro del sistema junto con la estructura de información requerida para su procesamiento y análisis. Incluye datos relacionados con frecuencia de muestreo, canales, metadatos experimentales y formato del archivo original.
Atributos principales	Nombre de la señal, formato del archivo, frecuencia de muestreo, canales registrados, unidades físicas, duración temporal y metadatos experimentales asociados.
Objetivo	Estandarizar la representación interna de señales neurofisiológicas para garantizar interoperabilidad entre los módulos de visualización, preprocesamiento y análisis.

Tabla 5: Entidad de dominio – SignalDataset

2.5.3. TrialDataset

ID	3
Elemento	TrialDataset
Descripción	Representa el conjunto estructurado de ensayos (<i>trials</i>) derivados de una señal EEG. Cada ensayo corresponde a un segmento temporal asociado a un estímulo, marcador o evento experimental específico.
Atributos principales	Canal asociado, frecuencia de muestreo, límites temporales, vector temporal relativo, matriz de ensayos y parámetros experimentales derivados.
Objetivo	Permitir el procesamiento organizado y eficiente de ensayos experimentales para análisis temporales, espectrales, tiempo-frecuencia y análisis de acoplamiento entre frecuencias.

Tabla 6: Entidad de dominio – TrialDataset

2.5.4. CouplingResult

ID	4
Elemento	CouplingResult
Descripción	Entidad encargada de almacenar los resultados generados por el módulo de análisis de acoplamiento cruzado de frecuencias (<i>Cross-Frequency Coupling</i>). Incluye resultados de PAC de un canal, PAC inter-canal y coherencia de fase PPC.
Atributos principales	Bandas de frecuencia de fase y amplitud, canales utilizados, trials seleccionados, tipo de análisis, índice de modulación, histograma de fase, magnitud y ángulo del vector de acoplamiento, matriz del comodulograma, parámetros de exportación y referencias a archivos generados.
Responsabilidades	Gestionar resultados PAC y PPC, almacenar métricas derivadas y parámetros utilizados, facilitar la exportación de análisis y permitir la persistencia de archivos de salida generados durante el procesamiento de señales neurofisiológicas.
Objetivo	Persistir resultados analíticos y artefactos derivados del procesamiento EEG para su visualización, exportación, comparación experimental y reutilización en sesiones futuras.

Tabla 7: Entidad de dominio – CouplingResult

2.5.5. ProjectSession

ID	5
Elemento	ProjectSession
Descripción	Representa el estado persistente de una sesión de trabajo dentro de Gamma Lab 2.0, incluyendo archivos cargados, parámetros configurados, análisis ejecutados, resultados almacenados y ventanas activas.
Atributos principales	Identificador del proyecto, fecha de creación, datasets activos, configuraciones de análisis, historial de procesamiento y ventanas abiertas.
Objetivo	Permitir la restauración automática de sesiones y la gestión estructurada de proyectos experimentales dentro del sistema.

Tabla 8: Entidad de dominio – ProjectSession

2.6. Suposiciones y dependencias

La presente sección describe las condiciones asumidas durante el desarrollo de Gamma Lab 2.0 y las dependencias externas necesarias para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema.

2.6.1. Suposiciones técnicas

- El sistema será ejecutado principalmente sobre sistemas operativos Windows 10 o superiores en arquitectura de 64 bits.
- El usuario dispondrá de permisos de lectura y escritura sobre el sistema de archivos local.
- Los archivos EEG utilizados estarán en formatos compatibles soportados por la plataforma (.abf, .edf, .bdf y .mat).
- Las señales utilizadas para el análisis PAC tendrán al menos un trial válido.
- Las señales utilizadas para PAC inter-canal y PPC tendrán al menos dos canales con trials generados.
- Las bandas de frecuencia seleccionadas para el análisis se encontrarán por debajo de la frecuencia de Nyquist.
- El entorno Python contará con las dependencias científicas requeridas por los módulos de procesamiento.

- El equipo de ejecución dispondrá de recursos computacionales suficientes para manipular señales EEG de gran tamaño.
- Los módulos desarrollados por terceros respetarán la arquitectura modular y las interfaces definidas por Gamma Lab.

2.6.2. Suposiciones sobre el usuario

- El usuario posee conocimientos básicos o intermedios sobre análisis de señales EEG y neurofisiología computacional.
- El usuario comprende conceptos relacionados con análisis temporal, frecuencial y tiempo-frecuencia.
- El usuario tiene experiencia básica utilizando interfaces gráficas de escritorio orientadas a análisis científico.
- El usuario es capaz de interpretar gráficas, espectros, comodulogramas, histogramas de fase y resultados estadísticos derivados del sistema.
- El usuario posee conocimientos básicos de inglés técnico para comprender terminología científica y nombres de librerías.

2.6.3. Dependencias externas y del sistema

- El sistema depende de bibliotecas científicas externas como NumPy, SciPy, MNE, PyWavelets, PyEDFlib, PyABF, Pandas y TensorPAC.
- La interfaz gráfica depende del framework PySide6 y de los componentes Qt.
- El almacenamiento y control de versiones del proyecto depende de Git y GitHub.
- La exportación de resultados depende de librerías de visualización y generación de archivos CSV, Excel, JSON e imágenes.
- El módulo de análisis PAC depende de las capacidades de procesamiento de señales proporcionadas por TensorPAC, MNE, NumPy y SciPy.
- El módulo de paralelización depende de las capacidades de multiprocesamiento del sistema operativo y del entorno Python.

3. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS

Este capítulo define los requerimientos específicos de GammaLab 2.0, derivados de las necesidades y brechas identificadas en la primera versión de la herramienta. Los requerimientos se dividen entre funcionales y no funcionales, y establecen las condiciones que deberá cumplir la nueva iteración para materializar la solución propuesta y orientar su posterior implementación y validación.

3.1. Nomenclatura de Requisitos

Con el fin de facilitar la trazabilidad y la referencia cruzada entre los distintos documentos que soportan este trabajo, se definió una nomenclatura que distingue los requisitos funcionales de los no funcionales.

Los requisitos funcionales se identifican mediante el prefijo **FR-XX-YY**, donde **XX** corresponde al área funcional de Gamma Lab 2.0 a la que se encuentra asociado el requisito y **YY** corresponde al número consecutivo dentro de dicha área. Esta clasificación busca mantener una correspondencia entre los requisitos y las principales capacidades funcionales involucradas en la evolución de la herramienta, facilitando su seguimiento a lo largo de las diferentes etapas de diseño, desarrollo y validación.

A partir de esta clasificación, los requisitos funcionales se organizan en cuatro áreas:

- **IO** – Entrada/Salida: agrupa los requisitos relacionados con la carga y persistencia de señales, así como el guardado y la apertura de proyectos, consolidando el manejo de datos como base funcional de la herramienta.
- **UI** – Interacción general: agrupa los requisitos orientados a mejorar la experiencia de usuario, la edición de la señal y la gestión de trials.
- **WV** – Wavelet/Escalograma: agrupa los requisitos que expanden y ajustan las capacidades de esta representación tiempo-frecuencia.
- **PAC** – Acoplamiento fase-amplitud: agrupa los requisitos del nuevo módulo de análisis incorporado en esta iteración, e incluye tanto el acoplamiento intra-canal como el inter-canal y la coherencia de fase.

Los requisitos no funcionales se identifican mediante el prefijo **NFR-X-YY**, donde **X** corresponde a la categoría del modelo FURPS+ y **YY** es el número consecutivo dentro de dicha categoría. Estos requisitos concentran, en particular, los lineamientos orientados a la estabilización y el fortalecimiento arquitectónico de la herramienta. Se identificaron requisitos en cuatro de las categorías del modelo:

- **U** – Usabilidad
- **P** – Rendimiento (Performance)
- **R** – Confiabilidad (Reliability)

- S – Soporte (Supportability)

3.2. Requerimientos Funcionales

3.2.1. Módulo IO – Entrada/Salida

Código	N° Matriz	Especificación
FR-IO-01	R08	El sistema debe persistir la señal cargada
FR-IO-02	R80	El sistema debe cargar señales en los formatos ABF, EDF y MAT.
FR-IO-03	R07	El sistema debe poder guardar un proyecto que registre la ruta y el nombre del archivo de señal de origen junto con el trabajo realizado sobre ella, sin incluir los datos de la señal. Bajo la extensión .glab
FR-IO-04	R78	El sistema debe abrir un proyecto guardado, restaurando la señal referenciada y el trabajo registrado en él, e informar cuando el archivo de señal referenciado ya no esté disponible.
FR-IO-05	R05	El sistema debe exportar los resultados de la sección de análisis en los formatos Excel, CSV, JSON, JPEG, JPG, PNG y TIFF.
FR-IO-06	R09	El sistema debe exportar a CSV una única columna de eje X cuando todas las series comparten el mismo eje.
FR-IO-07	R28	El sistema debe asignar un nombre de exportación en el que se incluya el nombre de la señal

Tabla 10: Requisitos funcionales del módulo IO

3.2.2. Módulo UI – Interacción general

Código	N° Matriz	Especificación
FR-UI-01	R01	El sistema debe permitir realizar cortes de la señal
FR-UI-02	R24	El sistema debe modificar un trial ya creado
FR-UI-03	R25	El sistema debe restablecer a sus valores por defecto todos los parámetros de una funcionalidad mediante un botón Clear, presente en cada funcionalidad que se ejecute con un botón.

Código	N° Matriz	Especificación
FR-UI-04	R26	El sistema debe mostrar los valores de los ejes X y Y correspondientes al punto de la señal sobre el que se posiciona el cursor.
FR-UI-05	R27	El sistema debe permitir escoger qué trials participan en cada análisis y descartar los que no deban usarse, conservándolos en el conjunto.
FR-UI-06	R29	El sistema debe ajustar el tiempo de muestreo
FR-UI-07	R30	El sistema debe tener zoom en todas las direcciones
FR-UI-08	R31	El sistema debe mostrar el umbral en mV
FR-UI-09	R32	El sistema debe mostrar Butterfly explícitamente
FR-UI-10	R36	El sistema debe realizar el promedio en todos los trials
FR-UI-11	R37	El sistema debe indicar en todo momento en qué trial se está trabajando.
FR-UI-12	R38	El sistema debe indicar qué trials participan en cada operación.
FR-UI-13	R40	El sistema debe remover un artefacto con medidas
FR-UI-14	R41	El sistema debe promediar los trials específicos que el usuario seleccione.
FR-UI-15	R68	El sistema debe identificar cada conjunto de trials por la pareja (archivo, canal) y devolver los trials del canal solicitado, sin reemplazarlo por el último generado.

Tabla 12: Requisitos funcionales del módulo UI

3.2.3. Módulo WV – Wavelet/Escalograma

Código	N° Matriz	Especificación
FR-WV-01	R33	El sistema debe permitir elegir el tipo de escala del escalograma de wavelet y ajustar el rango de valores representado.
FR-WV-02	R34	El sistema debe normalizar el escalograma de wavelet según el método que elija el usuario.
FR-WV-03	R35	El sistema debe exportar wavelet en EMF

Tabla 14: Requisitos funcionales del módulo WV

3.2.4. Módulo PAC – Acoplamiento fase-amplitud

Código	N° Matriz	Especificación
FR-PAC-01	R13	El sistema debe ejecutar el análisis de acoplamiento fase-amplitud (PAC) sobre una señal electrofisiológica cargada en el sistema.
FR-PAC-02	R14	El sistema debe seleccionar la banda de frecuencia correspondiente a la fase para el análisis PAC.
FR-PAC-03	R15	El sistema debe seleccionar la banda de frecuencia correspondiente a la amplitud para el análisis PAC.
FR-PAC-04	R16	El sistema debe permitir definir el intervalo temporal (o los trials) sobre el cual se ejecutará el análisis PAC.
FR-PAC-05	R17	El sistema debe calcular, para la banda de fase seleccionada y el rango de amplitud seleccionado, un mapa de acoplamiento fase-frecuencia mediante transformada
FR-PAC-06	R18	El sistema debe representar los resultados del análisis PAC mediante un mapa fase-frecuencia (fase en el eje X, frecuencia de amplitud en el eje Y).
FR-PAC-07	R19	El sistema debe representar la distribución de amplitud en función de la fase (histograma de fase) obtenida durante el análisis PAC.
FR-PAC-08	R20	El sistema debe calcular y mostrar el valor del vector de acoplamiento medio (magnitud y ángulo) derivado del histograma de fase.
FR-PAC-09	R21	El sistema debe exportar los resultados numéricos del análisis PAC de un canal.
FR-PAC-10	R22	El sistema debe exportar las representaciones gráficas generadas durante el análisis PAC de un canal.
FR-PAC-11	R23	El sistema debe almacenar los parámetros utilizados en cada ejecución del análisis PAC junto con sus resultados.
FR-PAC-12	R60	El sistema debe permitir seleccionar dos canales de la misma señal: uno como fuente de fase y otro como fuente de amplitud.
FR-PAC-13	R61	El sistema debe calcular el mapa de acoplamiento fase-frecuencia entre el canal de fase y el canal de amplitud seleccionados.
FR-PAC-14	R62	El sistema debe representar los resultados del análisis PAC inter-canal con las mismas visualizaciones que el PAC de un canal.
FR-PAC-15	R63	El sistema debe permitir seleccionar dos canales y un rango de frecuencias para calcular la coherencia de fase entre ellos.

Código	N° Matriz	Especificación
FR-PAC-16	R64	El sistema debe representar la coherencia de fase mediante un mapa tiempo-frecuencia.
FR-PAC-17	R65	El sistema debe exportar los resultados numéricos del análisis PAC inter-canal y de coherencia de fase (PPC).
FR-PAC-18	R66	El sistema debe exportar las representaciones gráficas del análisis PAC inter-canal y de coherencia de fase (PPC) como imagen.
FR-PAC-19	R75	El sistema debe segmentar la señal filtrada en la banda de frecuencia rápida tomando cada ciclo de la onda lenta como una época, y superponer todas las épocas en una misma gráfica de tipo butterfly con la fase del ciclo lento en el eje X.
FR-PAC-20	R76	El sistema debe aplicar sobre la señal activa un filtro Butterworth pasa-banda de fase cero, con frecuencia de corte inferior, frecuencia de corte superior y orden configurables por el usuario.

Tabla 16: Requisitos funcionales del módulo PAC

3.3. Requerimientos No Funcionales

3.3.1. Categoría U – Usabilidad

Código	N° Matriz	Especificación
NFR-U-01	R02	El sistema debe diferenciar los mensajes informativos, de advertencia y de error, usando el nivel de severidad que corresponda a cada situación.
NFR-U-02	R03	El sistema debe mostrar el resultado de la operación en la misma pantalla en la que se realizó
NFR-U-03	R04	Toda operación que tome más de 1 segundo debe mostrar retroalimentación visual de progreso
NFR-U-04	R06	El sistema debe contar con iconos para cada funcionalidad importante
NFR-U-05	R10	El sistema debe darle una bienvenida a usuarios nuevos
NFR-U-06	R12	El sistema debe comunicar el cierre de un proyecto
NFR-U-07	R42	El sistema debe mostrar una descripción emergente del propósito de cada control, en cada funcionalidad que se ejecute con un botón.

Código	N° Matriz	Especificación
NFR-U-08	R43	El sistema debe mostrar todas las funcionalidades de edición en Home.
NFR-U-09	R44	El sistema debe mostrar una pantalla de inicio mientras carga los recursos de arranque.

Tabla 18: Requisitos no funcionales de la categoría Usabilidad

3.3.2. Categoría P – Rendimiento

Código	N° Matriz	Especificación
NFR-P-01	R11	El sistema debe liberar la memoria de la señal activa y sus derivados al cerrarse el proyecto activo, ya sea por cierre explícito o por la carga de una nueva señal.
NFR-P-02	R45	El sistema debe liberar, al salir de cada módulo, los elementos gráficos y los datos pesados que mantenía en memoria, sin limitarse a ocultarlos de la pantalla.
NFR-P-03	R47	El sistema debe cargar el archivo de señal en un tiempo máximo de 2 segundos, contados desde que inicia la lectura hasta que la señal aparece en pantalla, sobre el hardware de referencia del laboratorio.
NFR-P-04	R48	El sistema debe completar el cómputo de Wavelet sobre una señal en ≤ 10 segundos
NFR-P-05	R49	El sistema debe renderizar al menos 3 canales simultáneamente sin que la tasa de refresco caiga por debajo de 24 FPS durante interacción de zoom o desplazamiento, sobre el hardware de referencia del laboratorio.
NFR-P-06	R50	El sistema debe completar el cambio entre módulos de análisis en ≤ 500 ms manteniendo la señal activa en memoria, sin recargarla desde disco.
NFR-P-07	R51	El sistema debe exportar tablas de resultados (CSV, Excel) de hasta 100,000 filas en menos de 2 segundos.
NFR-P-08	R52	El sistema debe liberar la memoria asociada a una señal previamente cargada en menos de 1 segundo tras confirmarse la carga de una nueva señal, evitando el crecimiento acumulativo
NFR-P-09	R53	El sistema debe completar su cierre, liberando los recursos gráficos, la memoria y los procesos que tenía abiertos, en menos de 3 segundos.

Código	N° Matriz	Especificación
NFR-P-10	R55	El sistema debe mantener la interfaz responsiva, con respuesta ≤ 0.3 s ante las interacciones, incluso mientras se ejecuta en segundo plano un análisis de frecuencia o de tiempo-frecuencia.
NFR-P-11	R56	El sistema debe completar el promedio de todos los trials en ≤ 1 segundo para un archivo típico de hasta 50 trials.
NFR-P-12	R57	El sistema debe completar la exportación de una gráfica individual en un tiempo máximo de 1 segundo cuando el formato es una imagen rasterizada, y de 3 segundos cuando es vectorial.
NFR-P-13	R59	El sistema debe construir las representaciones gráficas de las señales y de los resultados mediante conversiones en bloque, sin recorrer los datos elemento por elemento.
NFR-P-14	R71	El sistema debe ejecutar a través del servicio de tareas del núcleo, fuera del hilo de la interfaz, toda operación de cómputo de los plugins: la carga de señal, el corte de trials, el filtrado, la eliminación de artefactos, los análisis de frecuencia individuales y promediados, el promedio de trials, el ERP y los análisis de tiempo-frecuencia individuales y promediados.
NFR-P-15	R73	El sistema debe limitar a 2000 puntos por serie y 200 curvas simultáneas en pantalla, submuestreando solo la representación visual sin alterar los datos.
NFR-P-16	R74	El sistema debe ejecutar el análisis PAC a través del servicio de tareas del núcleo y completar un comodulograma de hasta 20×20 pares de bandas en un tiempo máximo de 30 s, permitiendo su cancelación.
NFR-P-17	R81	El sistema debe quedar listo para usarse en un tiempo máximo de 8 segundos desde que se ejecuta, sobre el hardware de referencia del laboratorio.

Tabla 20: Requisitos no funcionales de la categoría Rendimiento

3.3.3. Categoría R – Confiabilidad

Código	N° Matriz	Especificación
NFR-R-01	R46	El sistema debe garantizar la terminación y liberación de todo hilo trabajador del servicio de tareas cuando se detiene el plugin que originó la tarea o cuando esta se cancela, incluso si el cómputo sigue en curso.
NFR-R-02	R54	El sistema debe sincronizar el acceso al estado compartido de la sesión cuando varias operaciones se ejecuten a la vez, de modo que un solo propietario escriba cada dato.
NFR-R-03	R58	El sistema debe retirar los detectores de eventos registrados sobre las gráficas al salir de cada módulo.
NFR-R-04	R72	El sistema debe reutilizar la representación gráfica ya construida de una señal mientras sus datos no cambien, y descartarla de forma explícita cuando se modifiquen.
NFR-R-05	R79	El sistema no debe modificar la señal cargada ni los trials originales. Toda operación de preprocesamiento debe registrar su resultado como un conjunto derivado, conservando disponible el conjunto de origen.

Tabla 22: Requisitos no funcionales de la categoría Confiabilidad

3.3.4. Categoría S – Soporte

Código	N° Matriz	Especificación
NFR-S-01	R39	El sistema debe generar un ejecutable instalable que registre la extensión .glab en el sistema operativo, de modo que abrir un archivo de proyecto con doble clic inicie la aplicación.
NFR-S-02	R67	El sistema debe ofrecer una vía pública y única para leer, modificar e invalidar los trials y sus descartes, sin que ningún módulo alcance la estructura interna de los datos.
NFR-S-03	R69	El sistema debe registrar en el núcleo los servicios compartidos de exportación, medición y ajustes, y entregarlos a los módulos con una única instancia de cada uno, sin que ningún módulo los construya por su cuenta.
NFR-S-04	R70	El sistema debe ejecutar toda operación de cómputo pesada a través de un servicio de tareas registrado en el núcleo, que gestione la cola, la cancelación y la notificación de progreso.
NFR-S-05	R77	El sistema debe permitir incorporar un nuevo plugin de análisis registrándolo en el núcleo y despachando su cómputo por el orquestador, sin modificar el núcleo ni los plugins existentes.

Tabla 24: Requisitos no funcionales de la categoría Soporte

4. PROCESO INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Esta sección describe el proceso, técnicas y métodos utilizados para la construcción y administración de los requerimientos del sistema GammaLab 2.0. El objetivo es garantizar que los requerimientos funcionales y no funcionales se obtengan, documenten, validen y mantengan de forma consistente durante todo el ciclo de vida del proyecto.

4.1 Enfoque General

La ingeniería de requerimientos en GammaLab 2.0 se concibe como un proceso iterativo y controlado, alineado con el modelo incremental del proyecto. Cada iteración permite refinar, corregir o ampliar los requerimientos según la retroalimentación obtenida durante el análisis, diseño, implementación y pruebas.

El proceso involucra tanto al equipo de desarrollo como al cliente final, el Laboratorio de Señales, asegurando que las necesidades funcionales y los atributos de calidad se representen de manera verificable. Dado que GammaLab 2.0 es una versión evolutiva, el proceso parte del análisis de las limitaciones identificadas en la versión anterior y de los nuevos requerimientos planteados por el cliente.

4.2 Actividades del Proceso

El proceso seguido incluye las siguientes actividades principales:

- **Elicitación:** Identificación de necesidades mediante entrevistas con el cliente, análisis de las limitaciones de GammaLab 1.0 (SRS v1.1) y revisión técnica del dominio de señales EEG y análisis de acoplamiento cruzado de frecuencias.
- **Análisis y refinamiento:** Agrupación, priorización y normalización de requerimientos de acuerdo con los cuatro frentes de desarrollo de GammaLab 2.0: mejora de UX, paralelización del Kernel, nuevo módulo AC e integración de la paralelización con el módulo AC.
- **Documentación:** Registro en el presente SRS utilizando la estructura estándar IEEE 29148, garantizando claridad, unicidad y verificabilidad de cada requerimiento.
- **Validación:** Revisión con la directora del proyecto en su rol de Product Owner y con el cliente, mediante prototipos tempranos y sesiones de revisión semanales.
- **Trazabilidad:** Enlace de cada requerimiento con los módulos del sistema, el modelo de dominio y los criterios de medición definidos en las fichas de especificación.

4.3 Control de Cambios

Los requerimientos pueden modificarse a lo largo del desarrollo debido a hallazgos técnicos o retroalimentación del cliente. Para ello se implementa el siguiente proceso de control:

- Canal formal de solicitud de cambio registrado en el repositorio GitHub del proyecto.
- Evaluación técnica y de esfuerzo por parte del equipo de desarrollo.
- Aprobación por parte de la directora del proyecto (Product Owner).

- Actualización del SRS, de la distribución de requerimientos y de los artefactos afectados.

4.4 Artefactos Generados

Artefacto	Descripción
SRS v1.0	Presente documento de especificación de requerimientos.
Acta de requerimientos	Documento inicial que consolida los requerimientos levantados durante las sesiones de elicitación.
Distribución de requerimientos	Tabla de trazabilidad entre módulos y requerimientos funcionales.
PMP	Plan de Administración del Proyecto con cronograma, roles y gestión de riesgos.
Historial de versiones	Control de actualizaciones del SRS registrado en el encabezado del documento.

Tabla 25: Artefactos generados durante el proceso de ingeniería de requerimientos

5. PROCESO VERIFICACIÓN

Esta sección describe el proceso aplicado para verificar y validar los requerimientos definidos en esta especificación. La verificación en GammaLab 2.0 se desarrolla en estrecha colaboración con la directora del proyecto en su rol de Product Owner y con el cliente, el Laboratorio de Señales de la Universidad Nacional de Colombia.

5.1 Participación del Cliente

El proceso de verificación cuenta con la supervisión de la directora del proyecto, quien actúa como enlace técnico con el Laboratorio de Señales. Su rol es fundamental para:

- Validar los requerimientos durante su construcción, asegurando que reflejen las necesidades reales del laboratorio.
- Proporcionar retroalimentación técnica desde la perspectiva del dominio EEG y del análisis de acoplamiento cruzado de frecuencias.
- Aceptar o rechazar funcionalidades implementadas en cada iteración de desarrollo.
- Asegurar que los resultados y herramientas generadas sean coherentes con los procedimientos experimentales del laboratorio.

5.2 Dinámica de Verificación

El proceso de verificación se desarrolla mediante ciclos iterativos de revisión. En cada ciclo se presentan los avances implementados, incluyendo:

- Funcionalidades desarrolladas en la iteración correspondiente.
- Correcciones a requerimientos previamente observados.
- Comportamientos de la interfaz y flujos completos de uso.
- Validación directa sobre datos reales del laboratorio, cuando aplica.

Durante estas sesiones, el cliente aprueba, solicita ajustes o rechaza funcionalidades según su alineación con los objetivos científicos del proyecto. Esta dinámica permite mantener los requerimientos actualizados, claros y técnicamente viables a lo largo del ciclo de desarrollo.

5.3 Mecanismo de Control y Seguimiento

Para garantizar trazabilidad completa, el equipo utiliza un flujo controlado mediante ramas en el repositorio oficial de GitHub. Cada avance del sistema se gestiona bajo las siguientes prácticas:

- Creación de ramas específicas por funcionalidad o corrección (*feature/nombre-funcionalidad*).
- Revisión interna por parte del equipo antes de su presentación al cliente.
- Retroalimentación del cliente y ajustes sobre la misma rama.
- Aprobación final y posterior integración (*merge*) al repositorio principal.

Este mecanismo permite asociar cada requerimiento con su evidencia de implementación y con el historial de revisiones, asegurando un proceso verificable y consistente.

5.4 Criterios de Verificación por Tipo de Requerimiento

Tipo	Criterio de verificación
Requerimientos funcionales	Prueba directa de la funcionalidad sobre datos reales del laboratorio, con aprobación explícita del cliente.
Requerimientos de desempeño	Medición de tiempos de ejecución con señales de referencia y comparación contra los umbrales definidos.
Requerimientos no funcionales	Revisión de código, pruebas de carga y validación de comportamiento bajo condiciones adversas.
Requerimientos de persistencia	Verificación de restauración correcta de sesiones tras cierre y reapertura de la aplicación.
Paralelización (módulo PL)	Comparación de tiempos de análisis secuencial vs. paralelo sobre un conjunto de <i>trials</i> de referencia, verificando que la GUI permanezca responsiva.
Módulo PAC	Validación del cálculo PAC contra resultados de referencia conocidos, con revisión de la gráfica del comodulograma por parte del cliente.

Tabla 26: Criterios de verificación por tipo de requerimiento

5.5 Resultado del Proceso

La verificación continua con el cliente, junto con el control basado en ramas y revisiones iterativas, garantiza que:

- Cada requerimiento cuenta con una validación explícita antes de considerarse implementado.
- Los cambios se gestionen de forma transparente y ordenada mediante el historial de Git.
- El sistema final cumpla con las expectativas científicas y funcionales del Laboratorio de Señales
- La trazabilidad entre requerimientos, diseño y código se mantenga durante todo el desarrollo del proyecto.

6. ANEXOS